DIREZIONE DIDATTICA STATALE
5° CIRCOLO - DON GIUSEPPE PUGLISI
CERIGNOLA

via Terminillo snc – tel. e fax 0885.426807
sito web: vcircolocerignola.com
e-mail: fgee03200n@istruzione.it - fgee03200n@pec.istruzione.it
71042 Cerignola (FG)
cod. fisc.: 90004670718 cod. mecc.: FGEE03200N



Ai docenti dell'Infanzia
Ai docenti della Primaria
Alla DSGA
Al personale ATA – Assistenti Amministrativi
Al personale ATA – Collaboratori Scolastici
SEDE

Oggetto: Informazione sui DPI e su uso dei gel disinfettanti in dotazione della scuola

Con la presente si trasmettono in allegato le istruzioni relative a:

- Mascherine mediche;
- Respiratore FFP2;

Nonché schede tecniche relative ai gel disinfettanti in dotazione della scuola:

- Gelsoap (dispenser a muro installato in tutti gli uffici e in tutte le aule della scuola compresa aula mensa e palestra);
- Septavir 75 – Gel Mani (dispenser da 500 ml oppure flaconcini da 80 ml)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Martorano
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa*
ai sensi dell'art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - FGEE03200N - 5 CIRCOLO DIDATTICO TERMINILLO
Prot. 0001649/U del 03/08/2020 12:22:49 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

MANUALE D'USO – Mascherina medica monouso chirurgica –

Mod.MM-006

Versione: 2 – Data ultima versione del manuale 23-06-2020

DATI DEL FABBRICANTE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Matteo Monni in qualità di Legale Rappresentante della ditta Munus International Srl con sede in via della Valtiera, 233 – 06135 Perugia, Partita IVA 03376260547 **DICHIARA** che il prodotto: mascherina modello MM-006, Classe: I Tipo II monouso, Dispositivo Medico registrato presso Ministero della Salute N. **1964549** data fabbricazione: vedi etichetta, Lotto numero: vedi etichetta, è stato costruito rispettando le seguenti Direttive e norme: Regolamento (UE) n. 745/2017 Regolamento relativo ai dispositivi medici, Norma IEC 61882:2016, CEI EN 61511-1, UNI CEI EN ISO 15223-1:2017, UNI CEI EN 10993-1:2010, UNI CEI EN 1041:2009, UNI CEI EN 14971:2012, UNI EN 14683:2019 ed è quindi conforme alle Direttive e Normative vigenti. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Luogo: Perugia Data: 23/06/2020 Firma:

MUNUS INTERNATIONAL S.r.l. Via della Valtiera, 233 06135 Ponte S. Giovanni (PG) Tel. 075 394045 Fax 075 394057 C. F. e P. IVA 03376260547

PEC: munusinternational@legalmail.it
Telefono ufficio: +39 075 394045
E-mail: info@munusinternational.it - **Sito:** www.munusinternational.it

ASSISTENZA AUTORIZZATA

L'assistenza sui dispositivi medici può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale autorizzato e qualificato della ditta Munus International S.r.l.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso della mascherina monouso. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti suddivisi in capitoli e paragrafi.
L'indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dell'intero manuale. La numerazione delle pagine è progressiva e in ogni pagina è riportato il numero della stessa.
Questo manuale è destinato all'utente preposto all'utilizzo e alla conservazione del dispositivo medico ed è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.
Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso e in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto del fabbricante.
Munus International S.r.l. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo medico cui il manuale si riferisce.
Copia conforme di questo manuale è contenuta nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso Munus International S.r.l..
Munus International S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.
Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge.
Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto al momento della vendita.
L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione rispettino le leggi in vigore, per poterlo utilizzare in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

SIMBOLOGIA

LOT	Lotto numero		Dispositivo medico monouso
	Data di fabbricazione		Proteggere il dispositivo medico dall'umidità e dagli agenti atmosferici.
	Data di scadenza		Proteggere dalla luce solare diretta
	Fabbricante		Confezione riciclabile
	Leggere il manuale prima di ogni utilizzo	LATEX	Latex Free – prodotto senza lattice
CE	Marchio CE		

GARANZIA

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il dispositivo medico viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo.
I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:

1. La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) o ventiquattro (24) mesi a seconda della natura giuridica dell'acquirente.
2. La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione i prodotti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.
3. Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.
4. Durante il periodo di garanzia le componenti sostituite diventano di proprietà del produttore.
5. Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del dispositivo, oppure siano state apportate modifiche alla stessa.
6. La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l'utilizzo del dispositivo dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.
7. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il dispositivo medico è stato venduto.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1 Tipologia

2 Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)

3 Descrizione dettagliata del problema

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I dispositivi medici oggetto del presente manuale sono mascherine non sterili in 3 strati, prive di lattice e di fibra di vetro, anatomiche, destinate a essere indossate dagli operatori sanitari durante attività in ambito medico, o da altri utilizzatori, in altri ambienti, al fine di evitare la dispersione di agenti patogeni (quali ad esempio batteri o virus) dispersi in goccioline liquide (droplets) e aerosol che possono fuoriuscire dalla bocca e dal naso di chi la indossa.

La mascherina infatti serve per evitare contaminazioni verso il paziente durante un'attività medica.

Ogni mascherina è di forma rettangolare, unisex, in taglia unica e impacchettata in busta da 10 pezzi sfusi.

Colore della mascherina: bianco e azzurro; Bianco lato viso, azzurro lato mondo. Il dispositivo medico è di Classe I Tipo II e monouso.

DATI TECNICI

Strati: 3 - **Materiali:** strato 1 (esterno): TNT in PP 25 g/m2 idrorepellente**,** strato 2 (intermedio): filtro melt-blown 25g/m2, strato 3 (interno): TNT in PP 25g/m2 - **Dimensioni (mm):** 175 x 95 - **Peso (gr):** 2,7 - **Tipo in conformità alla norma UNI EN 14683:2019:** Tipo II - **Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%):** ≥ 98 - **Pressione differenziale (Pa/cm2):** < 40 - **Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa):** Non richiesto/≥ 16 - **Pulizia Microbica (ufc/g):** ≤ 30

Campo di applicazione ed uso previsto

Il dispositivo medico va utilizzato per:

- Evitare contaminazioni verso il paziente

Uso non previsto

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo "***CAMPO DI APPLICAZIONE ED USO PREVISTO***".

É inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo della mascherina come dispositivo di protezione individuale.
- L'utilizzo del dispositivo medico da soggetti che non hanno letto attentamente il manuale.
- L'utilizzo da parte di soggetti allergici alle sostanze cui è composto il prodotto.
- L'utilizzo da parte di bambini.
- Applicare la mascherina sulla pelle lesa o su una ferita.
- Applicare il dispositivo medico su parti del corpo diverse dal viso.

Limiti del dispositivo medico

- Le mascherine non curano alcuna malattia.
- Il dispositivo medico può essere utilizzato una sola volta in quanto monouso.

RISCHI RESIDUI

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al dispositivo medico. Qualsiasi danno derivante dall'utilizzo del dispositivo, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del dispositivo medico.
- Nel caso la struttura del dispositivo presenti deformazioni a seguito di un urto accidentale, quale potrebbe essere uno sfregamento contro un materiale abrasivo, tali da renderlo o presupporlo pericoloso e/o inutilizzabile, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.

Effetti collaterali

Non ci sono effetti collaterali da segnalare nel manuale di istruzioni. Tuttavia, non applicare il prodotto sulla pelle quando è presente una ferita o un'irritazione. In caso d'irritazione causata dal prodotto, sospendere immediatamente l'applicazione e consultare un medico.

Controindicazioni

Il dispositivo medico può provocare irritazioni su soggetti particolarmente sensibili o allergici ai materiali con cui è realizzato. Non utilizzare se si è allergici al materiale indicato al paragrafo ***"Dati tecnici"***.


USO

Conservazione

- Conservare il dispositivo medico in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore.
- Conservare il dispositivo medico lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.

Utilizzo

- Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone.
- Rimuovere la mascherina dalla confezione.
- Visualizzare il lato esterno della mascherina in blu, quello interno in bianco e la parte superiore con il filetto di metallo.
- Indossare la mascherina posizionando uno alla volta gli elastici dietro le orecchie.
- Premere con le dita il filetto di metallo su ambo i lati in modo che possa aderire alla forma del naso.
- Tirare la parte inferiore della mascherina verso il basso per coprire completamente naso, bocca e mento.
- Mentre si indossa e mentre si toglie la mascherina, evitare di toccare la superficie esterna con le mani e, se proprio necessario, effettuare il lavaggio delle mani dopo aver toccato la mascherina

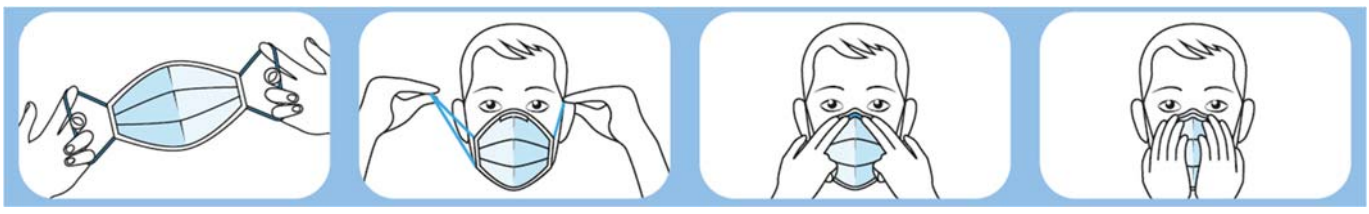

Smaltimento

Al termine dell'utilizzo del dispositivo medico procedere con il suo smaltimento e non riutilizzarlo. Il dispositivo medico è monouso.

I materiali di costruzione dei dispositivi medici non richiedono particolari procedure di smaltimento. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti in indifferenziati. Si consiglia di gettare la mascherina all'interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all'interno dello stesso.

Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto nell'ambiente.

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - FGEE03200N - 5 CIRCOLO DIDATTICO TERMINILLO
Prot. 0001649/U del 03/08/2020 12:22:49 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

MANUALE D'USO – Respiratore FFP2-KN95 Mod. MM-4

Versione: 0 – Data ultima versione del manuale 29-05-2020

DATI DEL FABBRICANTE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Matteo Monni in qualità di Legale Rappresentante della ditta Munus International Srl con sede in via della Valtiera, 233 – 06135 Perugia, Partita IVA 03376260547 **DICHIARA** che il prodotto: respiratore FFP2-KN95 modello MM-4, Categoria DPI: III – classe: FFP2 NR, data fabbricazione: 08/06/2020, Lotto numero: 1120201MM-4, è stato costruito rispettando le seguenti Direttive e norme: Regolamento (UE) n. 2016/425, Direttiva 2001/95/CE, Norma IEC 61882:2016, Norma IEC 61511-1:2016 - Part 1, EN 149:2001+A1:2009 ed è quindi conforme alle Direttive e Normative vigenti.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

L'organismo notificato Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. (2163) ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo N. 2163-PPE-658

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione sulla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII sotto la sorveglianza dell'organismo notificato Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. (2163) che ha rilasciato il certificato N. 2163 – PPE – 658/01

Luogo: Perugia Data: 29/05/2020 Firma:



PEC: munusinternational@legalmail.it
Telefono ufficio: +39 075 394045
E-mail: info@munusinternational.it - **Sito:** www.munusinternational.it

ASSISTENZA AUTORIZZATA

L'assistenza sui DPI può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale autorizzato e qualificato della ditta Munus International S.r.l.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso della mascherina monouso protettiva. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e paragrafi.

L'indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dell'intero manuale. La numerazione delle pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo manuale è destinato all'utente preposto all'utilizzo ed alla conservazione del DPI ed è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto del fabbricante.

Munus International S.r.l. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del DPI cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo manuale è contenuta nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso Munus International S.r.l.

Munus International S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge.

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, per poterlo utilizzare in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

GARANZIA

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il DPI viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:

1. La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) o ventiquattro (24) mesi a seconda della natura giuridica dell'acquirente.
2. La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione i prodotti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.
3. Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.
4. Durante il periodo di garanzia le componenti sostituite diventano di proprietà del produttore.
5. Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del dispositivo, oppure siano state apportate modifiche alla stessa.
6. La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l'utilizzo del dispositivo dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.
7. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il DPI è stato venduto.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1 Tipologia
2 Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
3 Descrizione dettagliata del problema

DESCRIZIONE DEL DPI

Il dispositivo di protezione individuale oggetto del presente manuale è una mascherina in tessuto non tessuto a 4 strati, destinata a proteggere le vie respiratorie da: gocce e particelle non oleose, particelle oleose e della polvere. Il modello di mascherina descritto è senza valvola.

La mascherina in oggetto è un dispositivo di protezione individuale di categoria III in conformità con l'allegato I del Regolamento (UE) 2016/425. Rispetta i requisiti della norma Armonizzata "EN 149:2001+A1:2009 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie — Semimaschere filtranti antipolvere — Requisiti, prove, marcatura". Sulla base della norma la mascherina è DPI di categoria III e classe FFP2 NR. NR = non riutilizzabile

La mascherina è utilizzabile in ambienti con molta polvere e pulviscolo prodotto da macchinari a carbone, ferro, minerali grezzi, quarzo o macchinari che processano cotone, farine e altro materiale.

L'azione filtrante rende il dispositivo efficace per la protezione delle vie respiratorie da aerosol – droplets.

DATI TECNICI

Dimensioni (mm): 168 x 108

Peso (gr): 6

Classificazione: FFP2 NR

Materiali: Tessuto non tessuto 50g/m2 (lato esterno) + melt-blown 55g/m2 + cotone ad aria calda 40g/m2 + Tessuto non tessuto 30g/m2 (lato interno)

Temperature di conservazione e utilizzo: + 5°C + 38°C

Taglia: Unica – si adatta ai diversi profili morfologici del viso grazie alle specifiche del materiale e degli elastici.

Campo di applicazione e uso previsto

Il DPI va utilizzato per proteggere le vie respiratorie da:

- gocce e particelle non oleose
- particelle oleose
- polvere

Uso non previsto

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo "***CAMPO DI APPLICAZIONE E USO PREVISTO***".
É inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo della mascherina come dispositivo medico.
- L'utilizzo del DPI da soggetti che non hanno letto attentamente il manuale.
- L'utilizzo da parte di soggetti allergici alle sostanze cui è composto il prodotto.
- L'utilizzo da parte di bambini in attività ludiche.
- Applicare la mascherina sulla pelle lesa o su una ferita.
- Applicare il DPI su parti del corpo diverse dal viso.

RISCHI RESIDUI

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al DPI. Qualsiasi danno derivante dall'utilizzo del dispositivo, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del DPI.
- Nel caso la struttura del dispositivo presenti deformazioni a seguito di un urto accidentale, quale potrebbe essere uno sfregamento contro un materiale abrasivo, tali da renderlo o presupporlo pericoloso e/o inutilizzabile, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni o procedere a sostituirlo con uno nuovo
- Il DPI ha una scadenza e non deve essere utilizzato MAI se risulta scaduto.

CONSERVAZIONE

Prima di conservare il DPI verificare che sia pulito.

- Conservare il DPI in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore.
- Conservare il DPI lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.


USO

Utilizzo

1. Aprire il dispositivo usando entrambe le mani assicurandosi che il ponte nasale sia sul lato esterno in alto
2. Porre la mascherina sopra naso e bocca, posizionarla sotto il mento con il ponte nasale rivolto verso l'alto
3. Portare entrambi gli elastici dietro le orecchie
4. Con l'utilizzo dei polpastrelli far aderire il nasello al setto nasale spingendo dall'esterno all' interno. Durante questa fase di prova della mascherina l'utente può sperimentare un minore apporto del flusso di ossigeno.
5. Prima di entrare nell'area di lavoro fare delle prove di respirazione per controllare la presenza di perdite o spifferi nella maschera.

5.1 Apporre entrambe le mani sulla mascherina e inspirare profondamente facendo attenzione a non modificare la posizione della mascherina. Se l'utente sperimenta una pressione negativa all'interno della maschera è normale. Se l'utente sente delle perdite di aria attorno al naso deve ripetere gli step di posizionamento maschera del 1 al 4.

6. Se non ci sono perdite o fuoriuscite di ossigeno allora si può procedere all'ingresso nell'area contaminata.

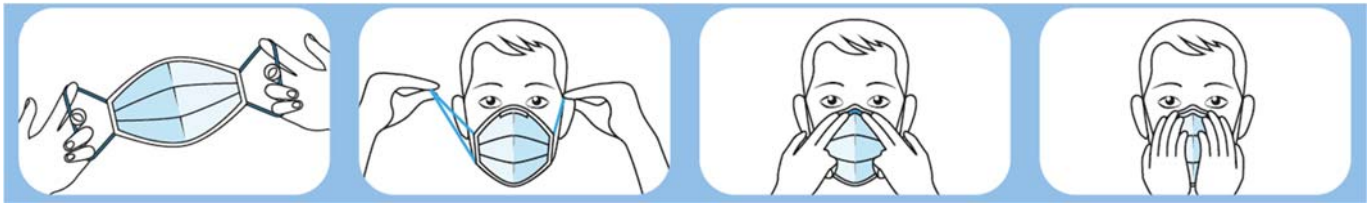

Smaltimento

Al termine dell'utilizzo del DPI procedere con il suo smaltimento.
I materiali di costruzione dei dispositivi medici non richiedono particolari procedure di smaltimento. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti in indifferenziati.

Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all'ambiente.



Gelsoap70

Aloe Vera

Gel idroalcolico igienizzante per il lavaggio rapido senza risciacquo delle mani

LINEA MANI

Generalità

Gelsoap70 è un sapone in gel per il **lavaggio rapido senza risciacquo** delle mani.
Gelsoap70 è un formulato a base di alcooli e di didecildimetil ammonio cloruro dalle proprietà igienizzanti e autoasciuganti che non richiede risciacquo e lascia le mani prive di appiccicosità.

Gelsoap70:

- **E' DERMATOLOGICAMENTE TESTATO**
- **CONTIENE ALOE VERA DALL'EFFETTO IDRATANTE E LENITIVO**
- **NON CONTIENE PROFUMI:**
  - per evitare qualsiasi fenomeno di allergenicità e/o fenomeni di scarsa compatibilità con la cute o degradazione
  - può essere utilizzato anche dal personale dei settori ospedalieri e alimentare

L'impiego di **Gelsoap70** garantisce una azione igienizzante immediata e ad ampio spettro.
Un solo lavaggio con **Gelsoap70** è sufficiente per ottenere un'ottima igienizzazione della cute.

Lascia sulle mani una gradevole sensazione di igiene

CONTIENE 70% ALCOOL

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Campi di applicazione

Gelsoap70 si utilizza quando si frequentano luoghi pubblici (uffici, ospedali, scuole, ristoranti, palestre, stazioni, metropolitane, toilettes, ascensori, laboratori di analisi, mezzi di trasporto pubblici) e quando si toccano superfici e oggetti sottoposti a frequenti contatti con le mani: maniglie, tastiere e mouse di computer, telefoni, corrimani, tavoli, pulsantiere di ascensori, denaro.
Gelsoap70 viene anche usato dagli operatori professionali:

- nelle industrie alimentari, negli esercizi di distribuzione alimentare e nella ristorazione collettiva per l'igiene delle mani che vengono a contatto con alimenti, anche durante i cicli di lavorazione e al passaggio da un alimento a un altro;
- nelle cliniche, ospedali, case di riposo e di cura, laboratori di analisi, ambulatori medici, veterinari, studi dentistici, centri estetici, per la pulizia e l'igienizzazione delle mani.

KITER Prodotti chimici per le pulizie professionali
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

Gelsoap70

Aloe Vera

LINEA MANI

Modalità di impiego

Gelsoap70 è fornito in quattro confezioni:
- flacone tascabile da 80 ml
- flacone da lt. 1 con dosatore con tappo flip -top
- flacone da 500 ml "OPERATORE" con tappo flip -top
- sacchetto da ml 800 per dispenser a muro
- canestri da 5 litri.



Gelsoap70 500 ml OPERATORE

Versare un'adeguata quantità di **Gelsoap70** sulle mani e strofinare fino ad asciugatura facendo particolare attenzione a dita e unghie. Non è necessario lavare le mani prima di usare **Gelsoap70** che da solo, in una unica operazione, deterge e igienizza le mani.

Precauzioni consigliate agli operatori professionali:
unghie corte e senza smalti, evitare unghie finte, rimuovere orologi, braccialetti, fedi, anelli in modo da avere durante le lavorazioni avambracci, polsi e mani libere.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Alcooli 70%, didecildimetilammonio cloruro, aloe vera
ASPETTO FISICO	gel trasparente incolore
PROFUMO	caratteristico
PESO SPECIFICO	0,87 kg/l
pH tal quale	7,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa

CONTIENE 70% ALCOOL secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 COVID-19.

Ulteriori informazioni

Il prodotto è infiammabile. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Evitare il contatto con gli occhi.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Il prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea relativi ai prodotti cosmetici.

Teme il gelo. Conservare a temperature comprese tra 0 e 30°C.

12 flaconi da 80 ml.
12 flaconi da 500 ml. "OPERATORE" con tappo flip-top
6 flaconi da 1 lt. con dosatore/tappo flip-top
6 sacchetti da 800 ml. per dispenser a muro
4 canestri da 5 lt.

KITER Prodotti chimici per le pulizie professionali
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - FGEE03200N - 5 CIRCOLO DIDATTICO TERMINILLO
Prot. 0001649/U del 03/08/2020 12:22:49 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

SEPTAVIR 75

SCHEDA TECNICA

INDICE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 1
NOME COMMERCIALE - 2
QUALIFICA - 3
FABBRICANTE E DISTRIBUTORE - 4
COMPOSIZIONE CHIMICA - 5
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO - 6
INDICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO - 7
ISTRUZIONI D'USO - 8
SICUREZZA ED IMPATTO AMBIENTALE - 9
AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA - 10
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICE - 11
CONTROLLI DI QUALITÀ - 12
PERIODI DI VALIDITÀ - 13
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE -14
NATURA E CAPACITÀ DEI CONTENITORI -15
MOTIVO ULTIMA REVISIONE -16

Cerichem Biopharm s.r.l.
lab@cerichem.com

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - FGEE03200N - 5 CIRCOLO DIDATTICO TERMINILLO
Prot. 0001649/U del 03/08/2020 12:22:49 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

SEPTAVIR 75

GEL IGIENIZZANTE MANI

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SEPTAVIR 75 GEL MANI è un igienizzante per le mani, pronto all'uso, che non necessita di risciacquo; si asciuga velocemente e lascia le mani fresche e morbide. L'Alcool etilico (CH3CH2OH), principio attivo contenuto nel SEPTAVIR 75, appartiene al gruppo chimico degli alcoli alifatici ed è un liquido incolore, limpido, di odore caratteristico gradevole, che evapora prontamente. La formulazione del SEPTAVIR 75 è, inoltre, arricchita con sostanze umettanti ed emollienti per la cute, le quali minimizzano l'effetto disidratante dell'alcool e ne incrementano l'attività igienizzante, attraverso un prolungamento del tempo di asciugatura e, pertanto, del tempo di contatto con il principio attivo. Ad esse si uniscono le essenze, di lavanda e/o bergamotto, che conferiscono al prodotto una delicata e gradevole profumazione.

2. NOME COMMERCIALE

SEPTAVIR 75

3. QUALIFICA

GEL IGIENIZZANTE MANI

4. FABBRICANTE E DISTRIBUTORE

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.
Viale Einaudi, snc - 71042 Cerignola(FG) - ITALY - P. IVA: 03728930714
TEL: +39 0885 444490 - FAX: +39 0885 444491 - E-MAIL: info@cerichem.com

5. COMPOSIZIONE CHIMICA

A100 g di prodotto contengono:
principio attivo: Alcool etilico 75 g; Eccipienti: propilenglicole 500 mg, glicerina vegetale 500 mg, amminometilpropanolo 190 mg, polimeri acrilati 15 mg, profumo 1 mg e acqua q.b. a 100g

6. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEPTAVIR 75 è un gel igienizzante per le mani, pronto all'uso, che non necessita di risciacquo; si asciuga velocemente e lascia le mani fresche e morbide. La presenza, dell'Alcool etilico, in concentrazione ottimale, conferisce al prodotto uno spettro d'azione particolarmente ampio e un'elevata capacità di riduzione della flora batterica residente e transitoria della cute.

7. INDICAZIONI E CAMPI D' IMPIEGO

SEPTAVIR 75 è un prodotto pronto all'uso, particolarmente indicato, nel settore ospedaliero, per la igienizzazione delle mani senza risciacquo. SEPTAVIR 75 è pratico in ogni situazione in cui è necessario igienizzare le mani: fuori casa, quando non ci si può lavare le mani (ad esempio in viaggio, sui mezzi pubblici, dopo avere toccato denaro ecc.)

8. ISTRUZIONI D' USO

Versare sul palmo della mano una quantità di prodotto sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani e strofinare per 60 secondi. Ripetere l'operazione. Il prodotto si utilizza senz'acqua.

9. SICUREZZA ED IMPATTO AMBIENTALE

Per i dati farmacologici relativi ai componenti e l'impatto ambientale consultare la relativa scheda di sicurezza.

10. AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA

Per maggiori informazioni fare riferimento alla scheda di sicurezza allegata.

(H) FRASI DI RISCHIO:
(EYE IRRIT. 2: IRRITAZIONE OCULARE, CATEGORIA 2, H319
FLAM. LIQ. 2: LIQUIDI INFIAMMABILI, CATEGORIA 2, H225

(P) CONSIGLI DI PRUDENZA:
(102): TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
(210): TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, SUPERFICI RISCALDATE, SCINTILLE, FIAMME E ALTRE FONTI DI INNESCO. VIETATO FUMARE.
(233): TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO.
IL PRODOTTO ALLA CONCENTRAZIONE D'USO NON PRESENTA CONTROINDICAZIONI.

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - FGEE03200N - 5 CIRCOLO DIDATTICO TERMINILLO
Prot. 0001649/U del 03/08/2020 12:22:49 I.1 - Normativa e disposizioni attuative

SEPTAVIR 75

GEL IGIENIZZANTE MANI

11. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: GEL LIMPIDO
COLORE: INCOLORE - TRASPARENTE
PESO SPECIFICO: 0,87 ± 0,02 Kg/lt
PH: 6,0-7,0
LIMITI DI ACCETTABILITÀ MICROBIOLOGICA: ≤ 5 UFC/ML

12. CONTROLLI DI QUALITÀ

L'AZIENDA OPERA CON UN SISTEMA DI QUALITÀ COMPLETO IN CONFORMITÁ ALLE NORME UNI EN ISO 9001/2015 - UNI EN 13485/2016.

13. PERIODO DI VALIDITÀ

36 MESI PER IL PRODOTTO IN CONFEZIONAMENTO INTEGRO E CORRETTAMENTE CONSERVATO.

14. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. Se il flacone viene aperto e chiuso correttamente alla fine di ogni operazione di pulizia, il preparato mantiene inalterate le sue caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche**.**

15. NATURA E CAPACITÀ DEI CONTENITORI

Il prodotto viene fornito nei seguenti confezionamenti: flacone 500 ml in pet con dosatore integrato. flacone da 80/100 ml in pet con tappo dosatore, tanica 5000 ml. Tutti gli imballi primari sono in polietilene (PET) e(PE);. Gli imballi primari non contengono lattice e non interferiscono in alcun modo, né fisicamente, né chimicamente con il prodotto.

16. MOTIVO ULTIMA REVISIONE

00- Prima Revisione (21 04 2020)

Pubblicazione riservata esclusivamente a categorie sanitarie qualificate.
Questo documento può subire revisioni per miglioramenti, evoluzioni normative, legislative o altro.
Si suggerisce di contattare periodicamente la Cerichem Biopharm s.r.l. per verificare lo stato di attualità dello stesso o di connettersi al sito:
www.cerichem.com